

## VOICEITT

**Objetivo:** apresentar de forma detalhada e didática a utilização da ferramenta Voiceltt, uma tecnologia revolucionária de reconhecimento de fala desenvolvida especificamente para pessoas com deficiências de fala e fala não padrão. Este guia abrangerá desde o processo inicial de cadastro até as funcionalidades mais avançadas, passando pelo treinamento necessário, configurações personalizadas, sempre com uma linguagem clara e acessível para usuários iniciantes, seus cuidadores e profissionais da educação.


### Passo 1: acessando à plataforma e registro inicial

#### 1. Navegue até o site oficial:

- Abra seu navegador web preferido e digite o endereço oficial: [www.voiceitt.com](http://www.voiceitt.com).
- O Voiceltt é uma aplicação baseada na web, o que significa que funciona diretamente no navegador, sem necessidade de downloads iniciais de software.

#### 2. Localize o botão de registro:


- Procure pelo botão “Start Your Free Trial Today” na página principal.
- Este botão geralmente está localizado na parte inferior da página.
- Clique nele para iniciar o processo de criação de sua conta gratuita de 30 dias.

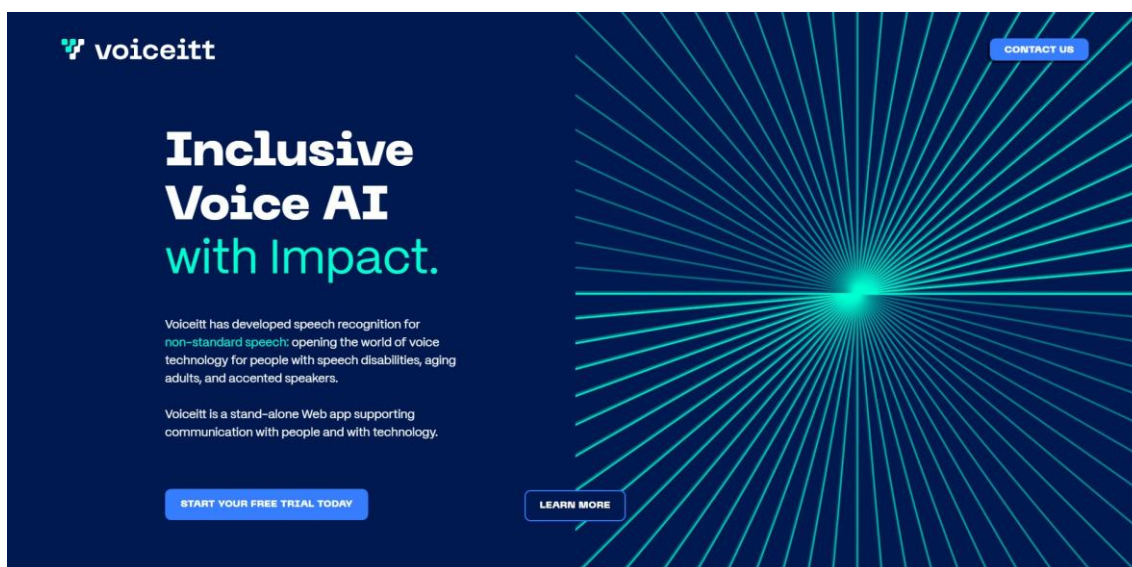

### Passo 2: acessando a configuração inicial

#### 1. Realize o cadastro ou autenticação na plataforma:

- Caso tenha um cadastro, digite seu e-mail e senha e clique em “Sign In”.

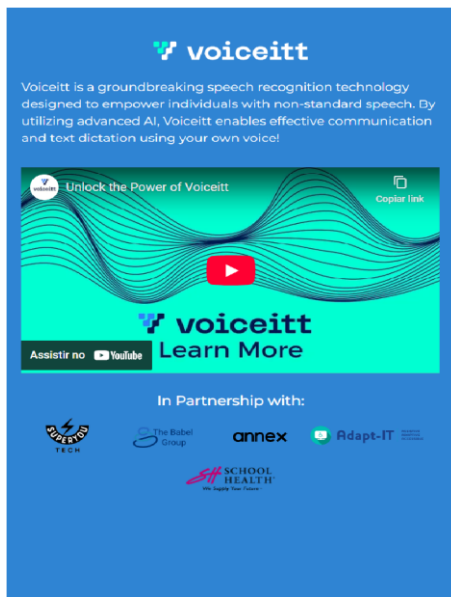

## Welcome to Voiceitt

Write messages and communicate using your own voice!

### Sign in



[Forgot password?](#)

SIGN IN


or [Create an account](#)



#### Essential Techn

We use only essential (st) local storage or similar te. These technologies help and recognize returning advertising trackers, pose fingerprinting, or any oth across sites or devices. B essential technologies. U

- b) Se ainda não tem uma conta, clique na opção “Create an account” e insira suas credenciais (e-mail e senha).

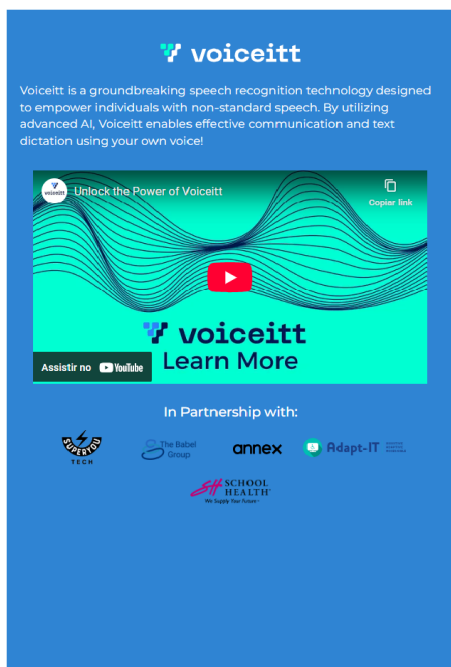

## Create an account and start your free trial!







Are you creating this account for someone else? ☐

If you support this customer, add your contact info so we can help you both more efficiently.

☐ I agree to receive occasional marketing communications. I understand I can unsubscribe at any time by contacting [support@voiceitt.com](mailto:support@voiceitt.com)


☐ I accept the [Terms & Conditions](#) and the [Privacy Policy](#)

CREATE AN ACCOUNT

or [Sign in to your account](#)




- c) Selecione a opção de registro de sua preferência, insira os dados solicitados (e-mail, senha) e siga as instruções para completar o registro.

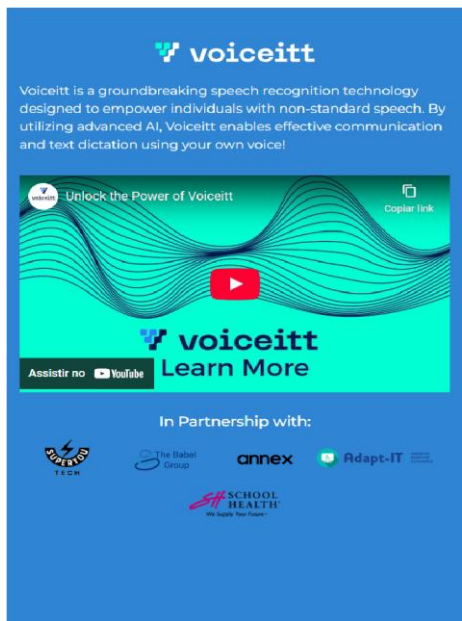

### Create an account and start your free trial!

Country Country is required ▼

Date of birth  
yyyy/mm/dd 

Are you creating this account for someone else? ▼

If you support this customer, add your contact info so we can help you both more efficiently.

☐ I agree to receive occasional marketing communications. I understand I can unsubscribe at any time by contacting [support@voiceitt.com](mailto:support@voiceitt.com)

☐ I accept the [Terms & Conditions](#) and the [Privacy Policy](#)

**CREATE AN ACCOUNT**

or [Sign in to your account](#)

- d) Considerações para menores de idade: se o usuário for menor de 16 anos, um pai ou responsável deve inserir a data de nascimento da criança e completar o registro. O responsável receberá um formulário de consentimento por e-mail que deve ser assinado e retornado ao Voiceitt antes que a conta seja ativada.

### Passo 3: iniciando o teste gratuito de 30 dias


#### 1. Ative o período de teste:

- Defina suas preferências básicas de idioma (atualmente disponível apenas em inglês) e data de nascimento.
- Estas configurações podem ser alteradas posteriormente conforme necessário.

### Passo 4: acompanhando o processo de treinamento


#### 1. Acesse o modo "Record":

- Na interface principal do Voiceitt, localize e clique no modo "Record" para realizar a gravação das primeiras 50 frases.
- Esta seção conterá as frases de treinamento que você precisará gravar.
- O sistema apresentará frases pré-selecionadas de diferentes complexidades e comprimentos para ensinar a IA sobre seus padrões únicos de fala.

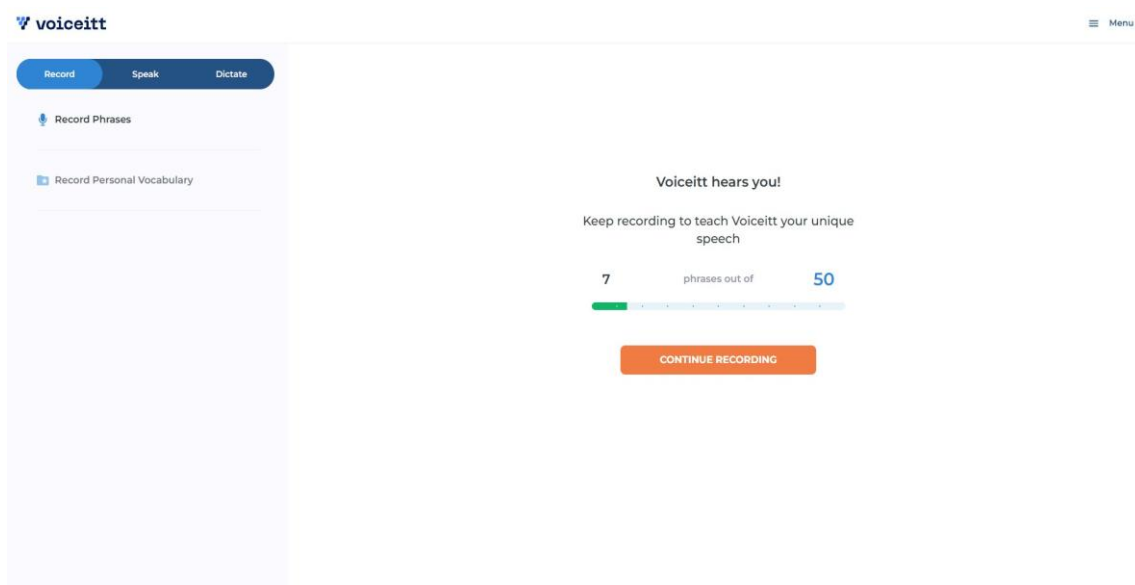


## 2. Realize o processo de gravação das frases:


- Para cada frase apresentada, clique no botão de gravação (“Tap to record”), leia a frase em voz alta de forma natural e clara, depois clique para parar a gravação.

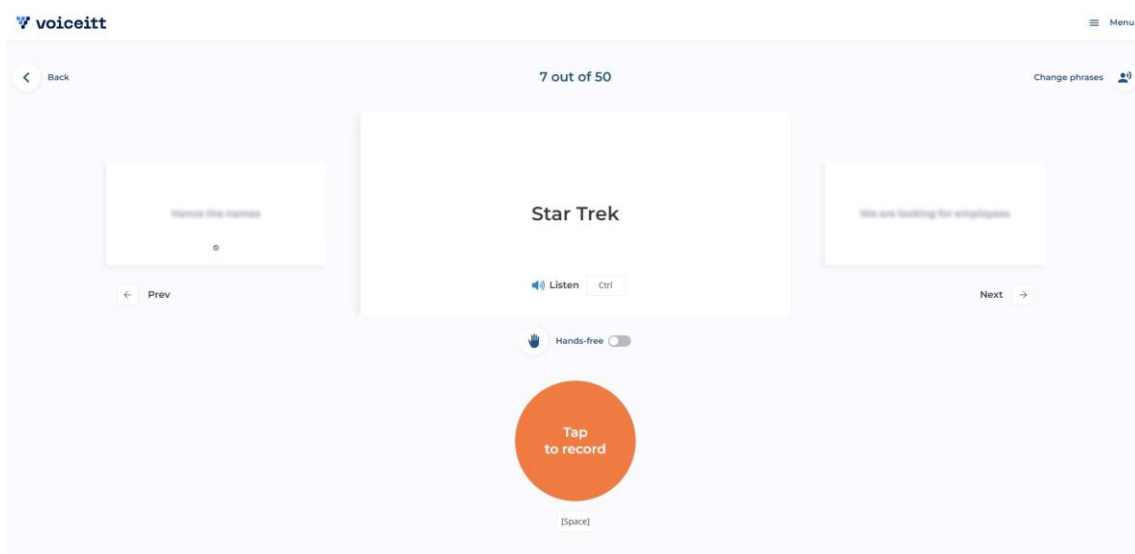

- Após a gravação, clique em “Tap to submit” para enviar o áudio.

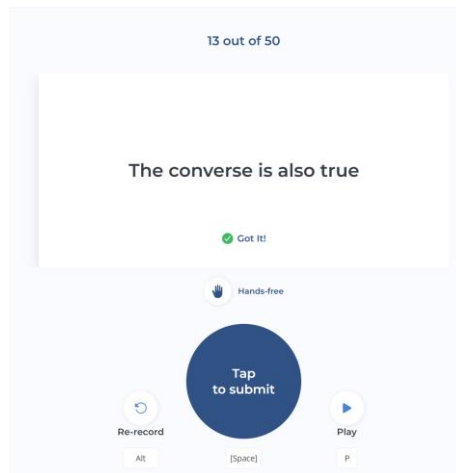

- c) Não tente alterar sua forma natural de falar.
- d) O objetivo é que a IA aprenda seus padrões únicos.
- e) Outra opção é clicar em “Next” para salvar a gravação e avançar para a próxima frase.
- f) Clique em “Yes, Save And Submit.” para enviar ou “No, delete recording and skip phrase.” para excluir e recomençar o processo.

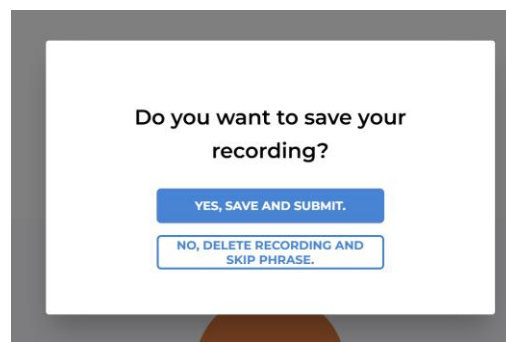

## **Passo 5: conhecendo o sistema de níveis progressivos**

### **1. Compreenda o sistema de níveis:**

- a) O Voicellt organiza o treinamento em 8 níveis progressivos:
  - Nível 1 (50 gravações)
  - Nível 2 (50-100);
  - Nível 3 (100-200);
  - Nível 4 (200-300);
  - Nível 5 (300-400);
  - Nível 6 (400-600);
  - Nível 7 (600-800);
  - Nível 8 (800-1000+ gravações).
- b) Cada nível completado resulta em uma atualização do seu perfil de voz personalizado.

**i Level 1: Hi I'm Voiceitt, nice to meet you!**

Voiceitt begins learning your unique speech pattern, but more recordings are needed. This is just the beginning!

50 phrases out of 100

**CONTINUE RECORDING**


**Passo 6: utilizando o modo “Speak” (speech-to-speech)**

**1. Acesse o modo “Speak”:**

- a) Acesse o modo “Speak” na interface principal.
- b) Este modo converte sua fala em uma voz computadorizada clara, facilitando a comunicação com outras pessoas.


**2. Conheça o processo de comunicação:**

- a) Clique no botão “Click to speak” (geralmente azul), fale uma frase curta ou média (por exemplo, “Hello! How are you?”), depois clique no botão “Listening tap to stop”.
- b) O Voiceitt processará sua fala e reproduzirá o que você disse em uma voz computadorizada clara e compreensível.

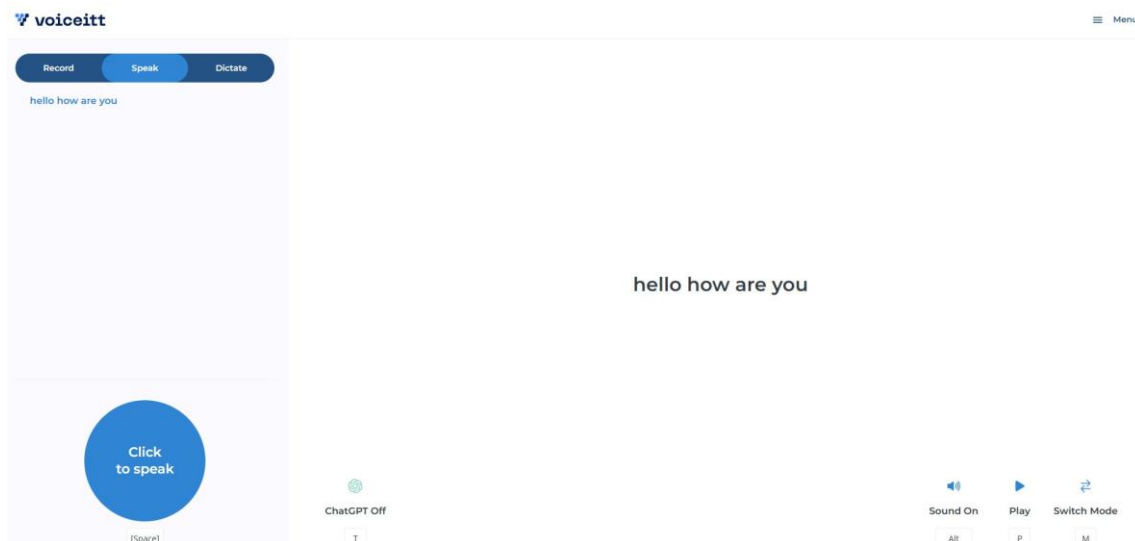

**3. Personalize a voz de saída:**

- a) Acesse o menu de configurações (botão “Menu” no canto superior direito) e selecione “Settings” para escolher diferentes vozes de saída disponíveis.

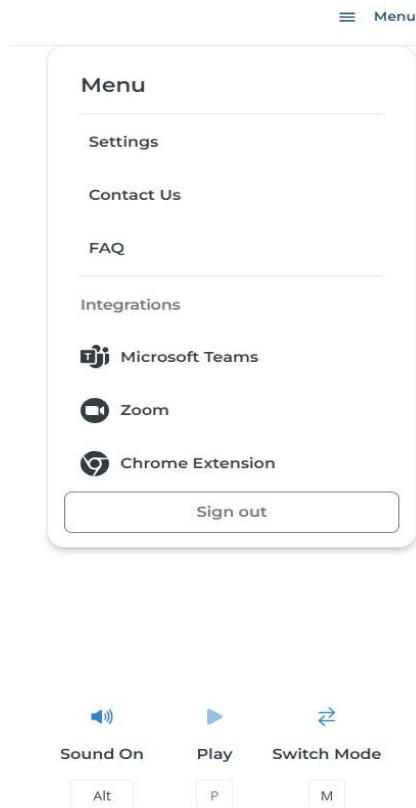

- b) Você pode ajustar a velocidade de reprodução da voz e ativar recursos como destaque de palavras para acompanhamento visual.

## Settings

### [General](#)

[Audio](#)

[Extra Options](#)

[Profile](#)

[Change Password](#)

[Privacy Policy](#)

[Terms and Conditions](#)

[Delete Account](#)

### Output Voice

Output voice

### Silence Time-out

A period of silence in seconds before app will playback what you just said

1.4

Please choose a value between 0.5 - 3.0

### Voice Playback Speed

The speed of the voice output that automatically repeats after you

0.75x


Please choose a value between 0.25 - 3x

SAVE

## 4. Integre com ChatGPT:

- No modo "Speak", ative a integração com ChatGPT clicando no botão na parte inferior que muda de "ChatGPT Off" para "ChatGPT On".
- Isso permite que você faça perguntas e interaja com a inteligência artificial usando sua própria voz, expandindo significativamente as possibilidades de


comunicação e acesso à informação.

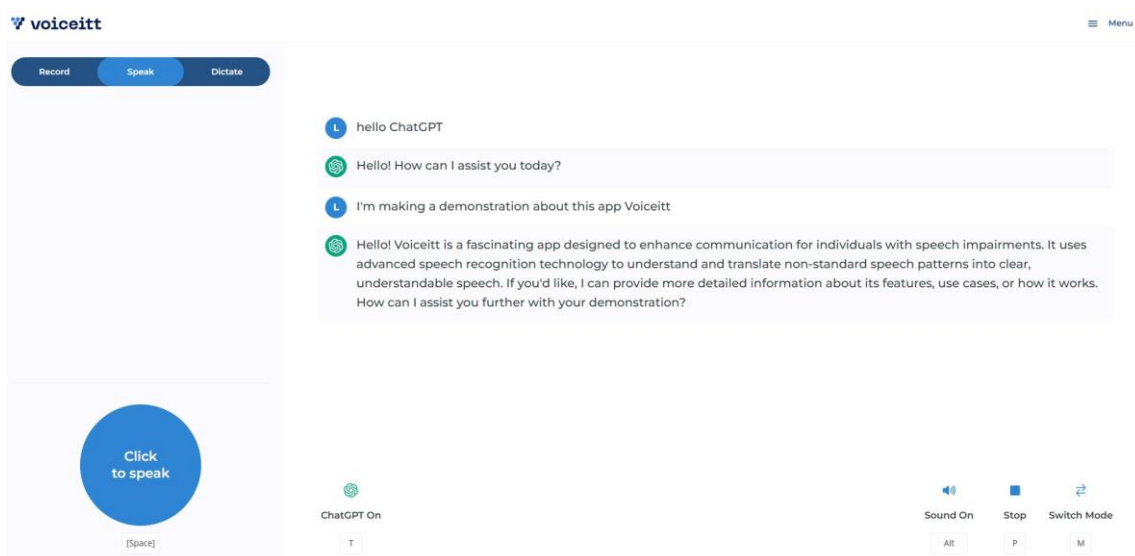

## Passo 7: usando o modo “Dictate” (speech-to-text)

### 1. Transite para o modo “Dictate”:

- Altere para o modo “Dictate” clicando no botão “Switch Mode” na interface.

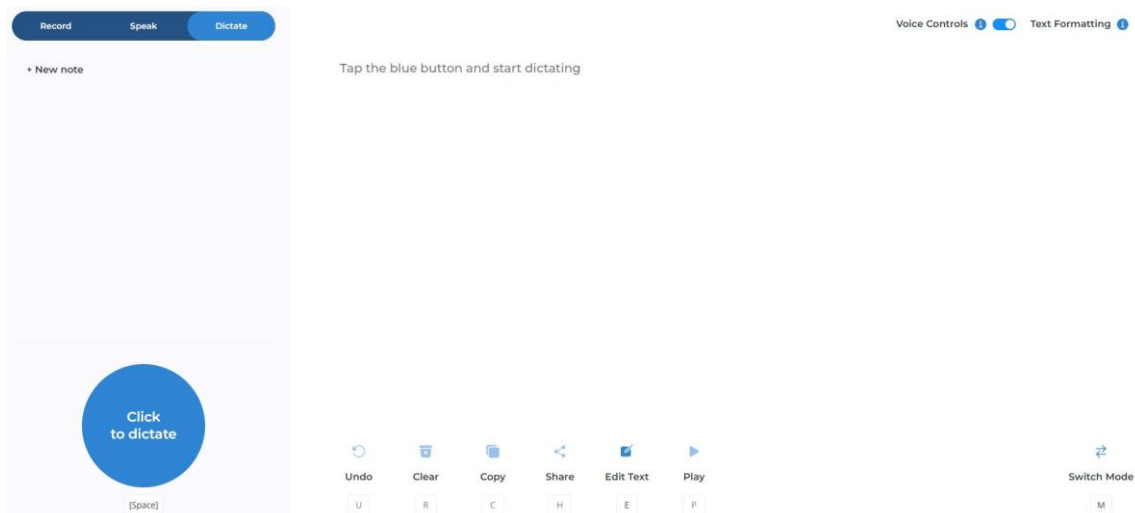

- Este modo converte sua fala em texto escrito na tela, ideal para ditado de e-mails, documentos, mensagens e outras necessidades de escrita.


### 2. Acesse o ditado contínuo:

- No modo “Dictate”, você pode falar livremente e o Voicelitt continuará ouvindo até que você peça para parar.
- Isso permite ditar mensagens longas, histórias ou documentos completos.
- O texto aparecerá na tela em tempo real conforme você fala.

### 3. Acesse os comandos de voz para edição:

- Utilize comandos de voz como “Listening tap to stop” para parar o ditado, “Copy” para copiar o texto, e “Clear” para limpar o texto da tela.




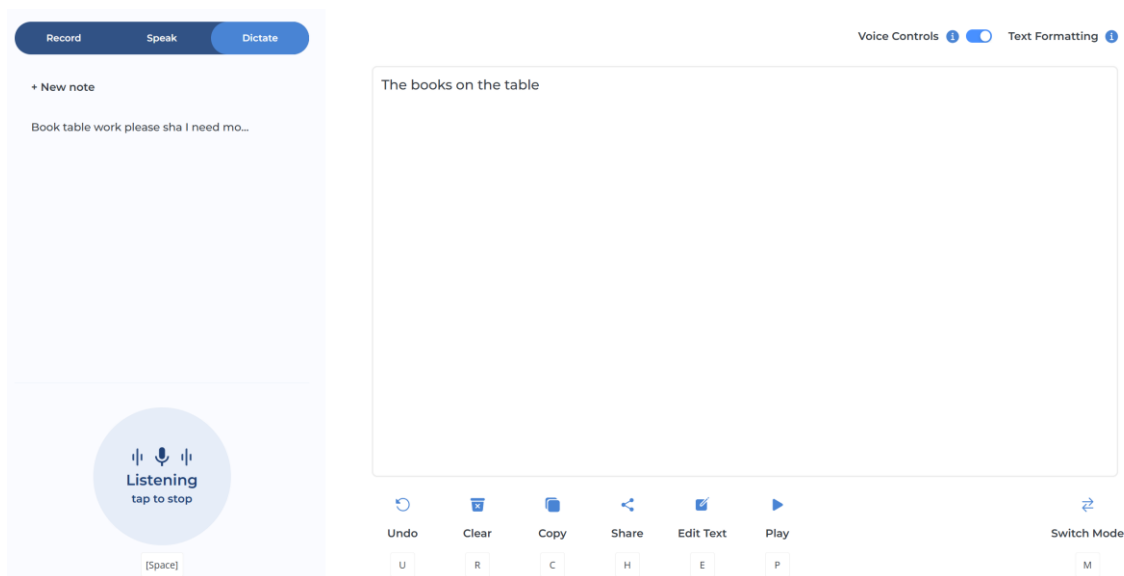

b) Você também pode editar o texto manualmente digitando diretamente na interface quando necessário ou clicando no botão “Edit Text”.

#### 4. Gerencie e salve notas:


- O texto ditado é automaticamente salvo na seção de notas no lado esquerdo da interface.
- Você pode retornar a mensagens anteriores, copiar texto para outros aplicativos, ou usar o botão “Play” para ouvir o texto sendo lido em voz alta para verificação.

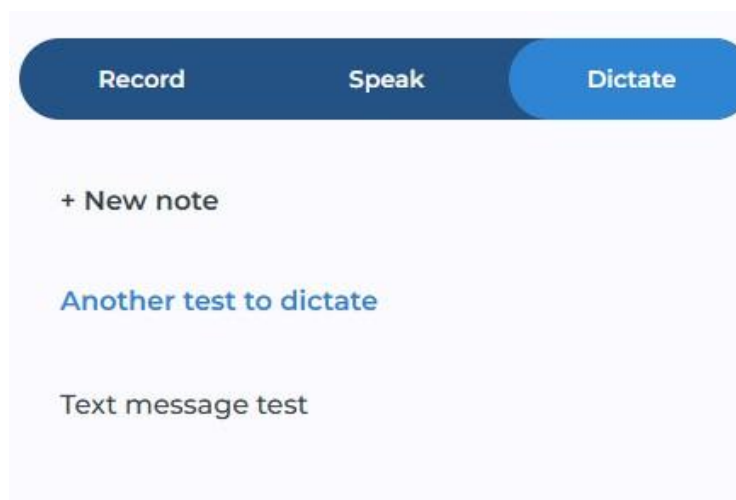

### Passo 8: configurando o vocabulário personalizado e atalhos

#### 1. Acesse a funcionalidade de vocabulário personalizado:


- No modo “Record”, localize e clique em “Record Personal Vocabulary”.

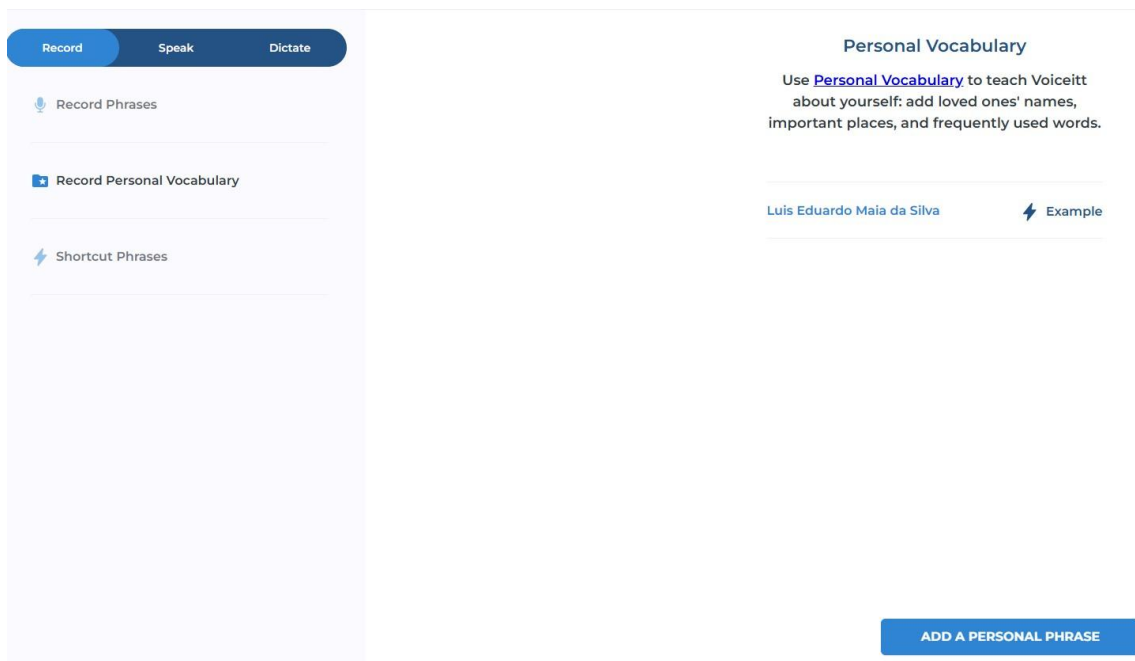

b) Esta seção permite ensinar ao Voicellt palavras específicas que são importantes para você, como nomes próprios, nomes de animais de estimação, endereços, jargões profissionais ou acadêmicos que não fazem parte do vocabulário padrão.

## 2. Adicione novas palavras:

a) Clique em “Add a Personal Phrase”, digite a palavra ou frase desejada no campo de texto, clique em “Record” e então grave a palavra uma vez falando-a naturalmente.

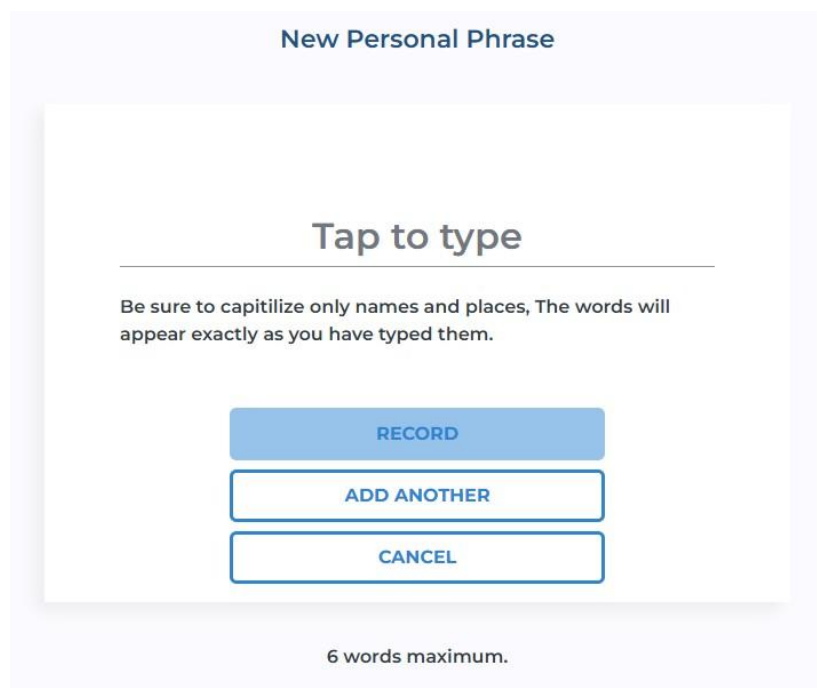


b) Aguarde algumas horas para que o Voicellt processe e incorpore esta nova palavra ao seu perfil de reconhecimento personalizado.

## 3. Configure frases de atalho:

a) Acesse “Shortcut Phrases” no modo “Record” para criar atalhos que permitem

falar uma palavra curta para que o Voiceltt reproduza uma mensagem mais longa.

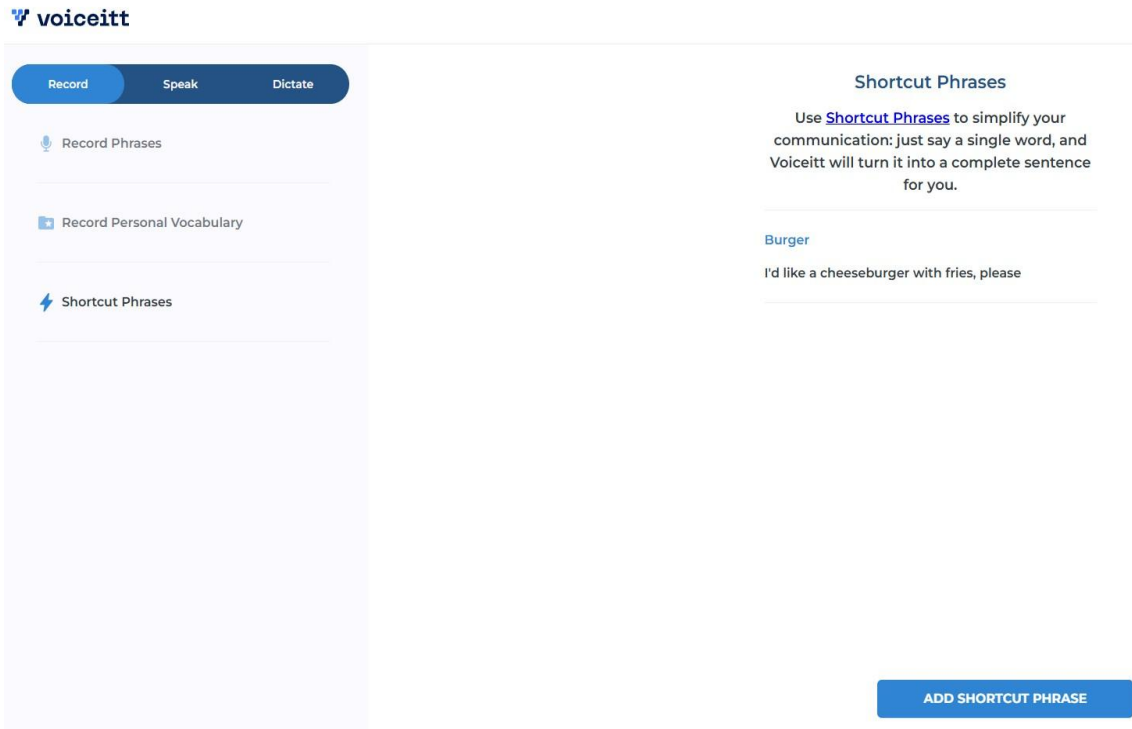

- b) Por exemplo, você pode configurar que ao dizer “burger”, o sistema reproduza “I want a burger, please!”.

The screenshot shows a modal dialog box titled 'New Shortcut Phrase'. It has two text input fields. The first field is labeled 'When you say:' and the second field is labeled 'Voiceitt will say:'. At the bottom of the dialog, there are two buttons: 'CANCEL' and 'ADD'.


## Passo 9: instalando e configurando a extensão no Chrome

### 1. Verifique os requisitos:

- Antes de instalar a extensão Chrome, certifique-se de ter completado pelo menos 200 gravações no Voiceltt e de estar usando um laptop ou desktop com navegador Google Chrome instalado.
- A extensão não funciona em tablets, celulares ou outros navegadores como Safari ou Edge.

## 2. Realize o download e a instalação:

- Visite a Chrome Web Store, procure por “Voiceltt Chrome Extension” e clique em “Usar no Chrome”.

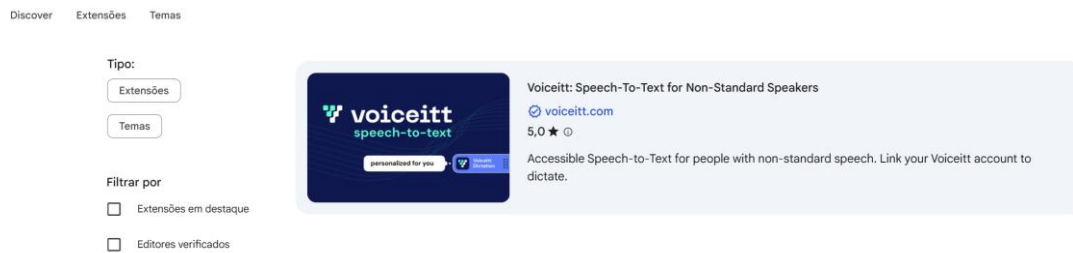

- Após a instalação, você verá o ícone do Voiceltt na barra de endereços do navegador.
- Se não aparecer, clique no ícone de puzzle (extensões) e fixe o Voiceltt clicando no ícone de alfinete.

## 3. Configure atalhos de teclado:

- Os atalhos padrão são “Alt + R” para PC/Chromebook e “Option + R” para Mac.
- Para alterá-los, clique com o botão direito no ícone do Voiceltt, selecione “Opções” e “Change” em “Keyboard Shortcut”.
- Escolha uma tecla modificadora (Alt, Ctrl, Option) e uma letra de sua preferência.

## 4. Teste a configuração de microfone:

- Para verificar ou alterar qual microfone a extensão está usando, clique com o botão direito no ícone do Voiceltt e selecione “Opções”.
- Se você permitiu acesso ao microfone, verá “Mic Access Granted”.



- Selecione “Change” para ver outras opções de microfone disponíveis no seu sistema.

## Passo 10: integrando com plataformas de videoconferência

### 1. Configure para Microsoft Teams:

- O uso no Teams requer uma conta Microsoft 365 paga para acessar a loja de aplicativos e instalar o “Voiceltt Captions”.
- Funciona apenas em computadores desktop/laptop.
- Acesse o menu do Voiceltt, selecione “Microsoft Teams” e complete o processo de integração seguindo as instruções específicas.

### 2. Configure para Zoom:

- O Zoom oferece integração gratuita com “Voiceltt Captions” e é compatível com dispositivos móveis e tablets, além de computadores.
- Esta é frequentemente a opção mais acessível para usuários que desejam legendas personalizadas em videoconferências sem custos adicionais de plataforma.

### 3. Entenda o funcionamento das legendas personalizadas:

- a) Uma vez configuradas, as legendas Voiceltt aparecerão na tela durante as reuniões, traduzindo sua fala não padrão em texto legível para outros participantes.
- b) Note que estas legendas são add-ons e não aparecem nas transcrições oficiais das reuniões, apenas nas legendas ao vivo durante as chamadas.

### Passo 11: comparando planos e limitações

#### 1. Analise os planos disponíveis:

- a) O Voiceltt oferece planos de assinaturas para atender algumas necessidades de uso. Analise os recursos disponíveis.

Aspecto	Teste Gratuito (30 dias)	Assinatura Mensal	Assinatura Anual
Preço	Gratuito	\$49.99/mês	\$499.99/ano
Suporte Técnico	Por e-mail	Suporte prioritário via parceiros	Suporte prioritário via parceiros
Limitações Principais	Duração de 30 dias, requer conexão de Internet	Requer conexão de Internet contínua	Requer conexão de Internet contínua

O Voiceltt é uma ferramenta inovadora que democratiza a tecnologia de voz para pessoas com deficiências de fala, ampliando suas oportunidades em diversas áreas. No âmbito educacional, permite que estudantes com condições como paralisia cerebral ou síndrome de Down participem ativamente de aulas e trabalhos. Profissionalmente, facilita a participação em reuniões e o uso de assistentes virtuais, promovendo a inclusão no mercado de trabalho. Terapeuticamente, apoia fonoaudiólogos na reabilitação da fala, aumentando a confiança e independência comunicativa dos pacientes. A tecnologia também melhora a autonomia doméstica ao permitir o controle de dispositivos inteligentes por voz.

Embora o Voiceltt seja eficaz para deficiências de fala leve a moderada, a experiência é individual. Recomenda-se aproveitar o teste gratuito de 30 dias. Para melhores resultados, é importante investir em treinamento inicial, gravando pelo menos 50 frases, idealmente 200 ou mais. A assinatura anual é mais econômica que a mensal. É importante ter expectativas realistas: o Voiceltt melhora a comunicação drasticamente, mas exige paciência, prática e treinamento contínuo. Para otimizar a experiência e resolver desafios técnicos, é essencial manter contato com o suporte técnico, especialmente nas primeiras semanas de uso.